

Hinweise zum Gebrauch

Lesen Sie die Packungsbeilage vor Anwendung des Besremi-Fertigpens 500 Mikrogramm sorgfältig durch. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Ihr Arzt oder Apotheker wird Ihnen zeigen, wie Sie den Pen anwenden müssen.

Der Besremi-Fertigpen 500 Mikrogramm kann für die Injektion von Dosen von 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 und 500 Mikrogramm verwendet werden. Derselbe Pen kann zweimal verwendet werden, solange die Summe der beiden Dosen 500 Mikrogramm nicht überschreitet. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, welche Dosis Sie benötigen. Vermerken Sie bitte Datum und Dosis Ihrer Injektion, wie von Ihrem Arzt angewiesen.

Bewahren Sie den Pen im Umkarton im Kühlschrank auf.

Nehmen Sie den Pen 15 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank und lassen ihn auf Raumtemperatur aufwärmen.

Führen Sie die Injektion in einem gut beleuchteten und ruhigen Raum durch.


Sie benötigen folgendes Zubehör für Ihre Injektion:


- Besremi-Fertigpen
- Nadel (Typ: mylife AutoProtect PRO 29G × 8 mm)
- Alkoholtupfer (nicht beiliegend)
- Optional: Klebepflaster (nicht beiliegend)

Im Lieferumfang des Besremi-Fertigpens sind zwei Nadeln enthalten. Verwenden Sie für jede Injektion immer eine neue Nadel.


Verwenden Sie keinen Pen, der beschädigt erscheint. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Anwendung den Eindruck haben, dass Sie ihn beschädigt haben könnten (z. B. durch Fallenlassen oder Ausübung von großer Kraft), verwenden Sie den Pen nicht weiter. Besorgen Sie sich einen neuen Pen und beginnen Sie noch einmal von vorne.

Beschreibung des Besremi-Fertigpens 500 Mikrogramm

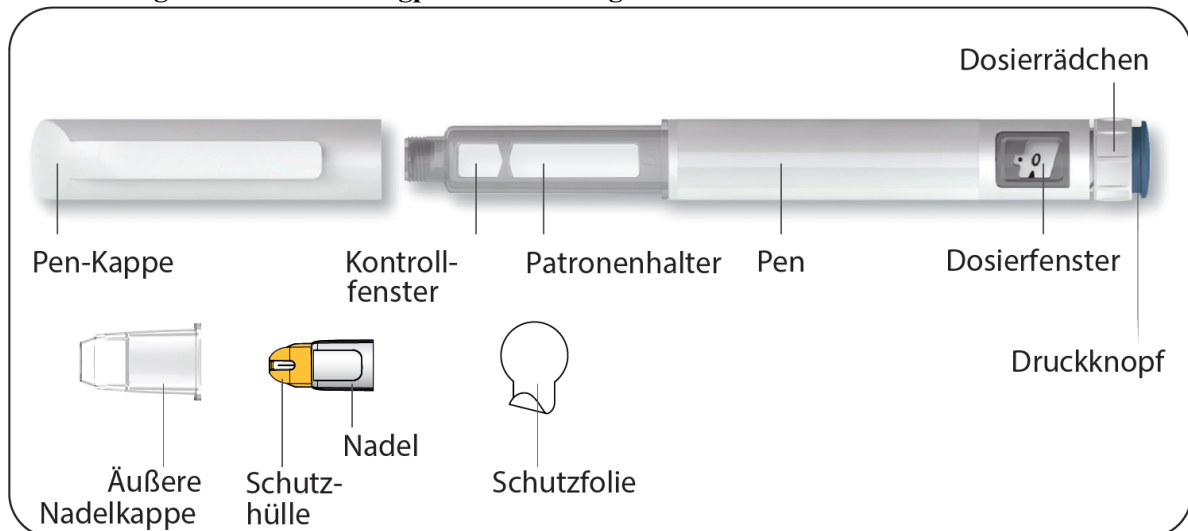


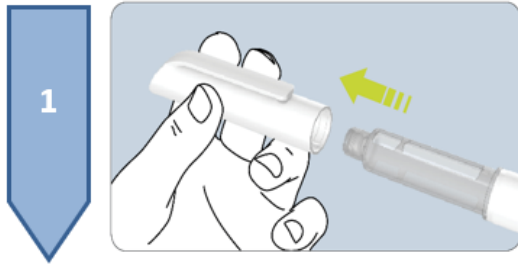


- Waschen Sie vor Beginn Ihre Hände.
- Prüfen Sie, ob das Produkt nicht abgelaufen ist.
- Ziehen Sie die Kappe vom Pen ab.

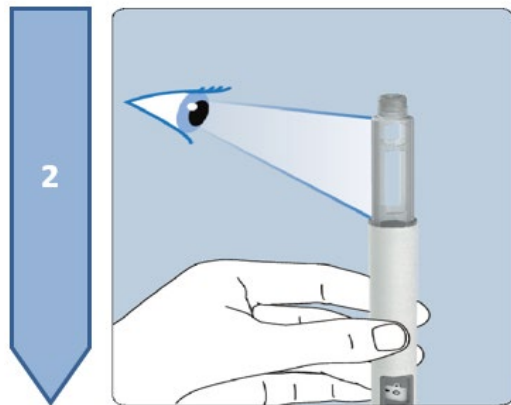


- Überprüfen Sie die Lösung entlang des Kontrollfensters an jeder Seite des Patronenhalters.
- Verwenden Sie den Pen nicht, wenn die Lösung trübe ist, Partikel oder Flöckchen enthält oder wenn sie eine andere Farbe aufweist als farblos bis hellgelb.

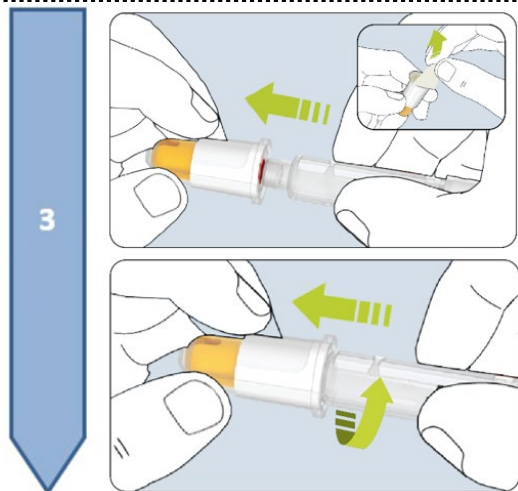


- Nehmen Sie eine neue Nadel und entfernen Sie die Schutzfolie.
- Setzen Sie den Pen gerade und mittig auf die Nadel, um zu verhindern, dass er verkantet oder sich verbiegt.
- Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.
- Schrauben Sie die Nadel auf den Pen, indem Sie den Pen mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

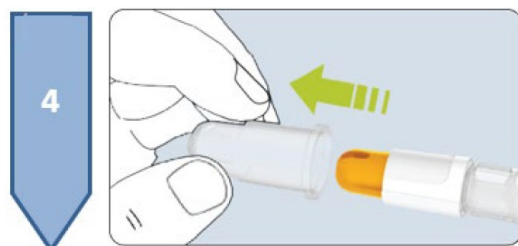


- Ziehen Sie die äußere Nadelkappe von der Nadel ab.
- Setzen Sie die äußere Nadelkappe erst wieder auf, wenn Sie das Arzneimittel injiziert haben. Berühren Sie zu keinem Zeitpunkt die Nadelspitze.
- Wenn Sie Ihren Besremi-Fertigpen 500 Mikrogramm zuvor schon einmal angewendet haben und ihn ein zweites Mal verwenden, gehen Sie direkt zu Schritt 7.
- Wenn Sie diesen Pen das erste Mal anwenden, fahren Sie mit der Vorbereitung des Pens in Schritt 5 fort.

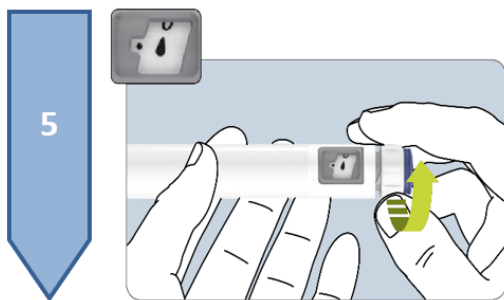


- Wenn Sie diesen Pen das erste Mal anwenden, bereiten Sie den Pen für die Injektion vor, indem Sie das Dosierrädchen so lange drehen, bis das Symbol von einem „Tropfen“ sichtbar wird. Das Symbol des „Tropfens“ muss sich auf einer Linie mit dem Punkt im Dosierfenster befinden.

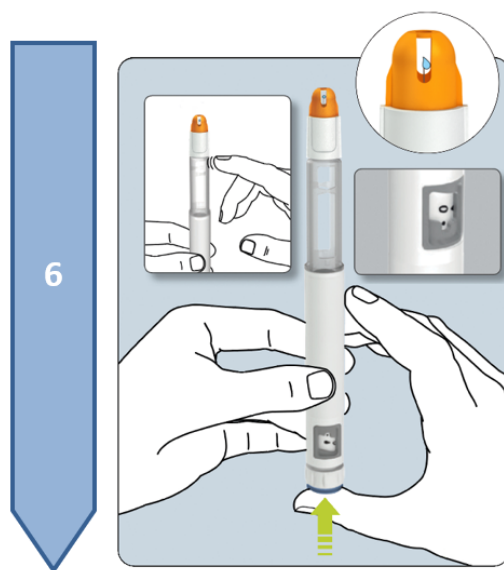


- Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben und stellen Sie sicher, dass Sie das Dosierfenster sehen können.
- Richten Sie den Pen nicht auf Ihr Gesicht oder auf das Gesicht einer anderen Person.
- Klopfen Sie mit Ihren Fingern vorsichtig an den Pen (Patronenhalter), damit eventuelle Luftblasen an die Spitze des Patronenhalters aufsteigen können.
- Drücken Sie mit Ihrem Daumen auf den Druckknopf, bis sich die „0“-Markierung auf einer Linie mit dem Punkt im Dosierfenster befindet.
- Sie werden im Dosierfenster sehen, wie sich das Symbol des „Tropfens“ und die „0“-Markierung abwechseln, und Sie werden leise Klickgeräusche hören, wenn sich der Knopf bewegt.
- Wenn Sie durch den kleinen Spalt an der Spitze der orangefarbenen Schutzhülle der Nadel schauen, sollten Sie ein Tröpfchen Flüssigkeit an der Nadelspitze sehen.
- Wenn Sie kein Tröpfchen an der Nadelspitze sehen, wiederholen Sie Schritt 5 und 6 bis zu sechs Mal, bis ein Tröpfchen erscheint.
- Wenn Sie das Tröpfchen auch nach dem siebten Mal nicht sehen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

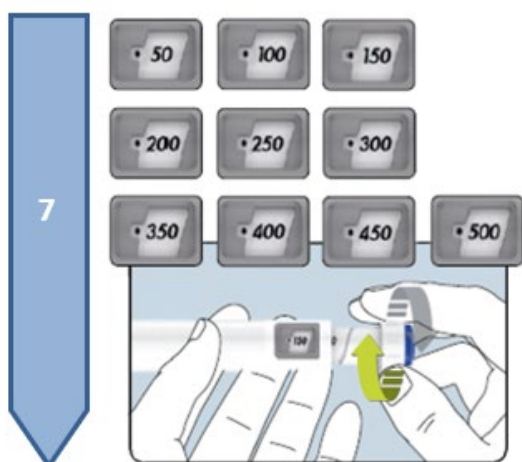


- Stellen Sie durch Drehen des Dosierrädchens die Dosis, die Ihnen Ihr Arzt verschrieben hat, indem Sie am Dosierrädchen drehen. Die gewählte Dosis muss sich auf einer Linie mit dem Punkt in dem Dosierfenster befinden. Falls notwendig, korrigieren Sie die Dosis, indem Sie das Dosierrädchen auf und ab drehen.
- Wenn Sie die erforderliche Dosiseinstellung durch Drehen des Dosierrädchens nicht erzielen können, ist in Ihrem Pen vielleicht nicht mehr genug Arzneimittel übrig. Wenden Sie keine weitere Kraft an. Besorgen Sie sich stattdessen einen neuen Pen.

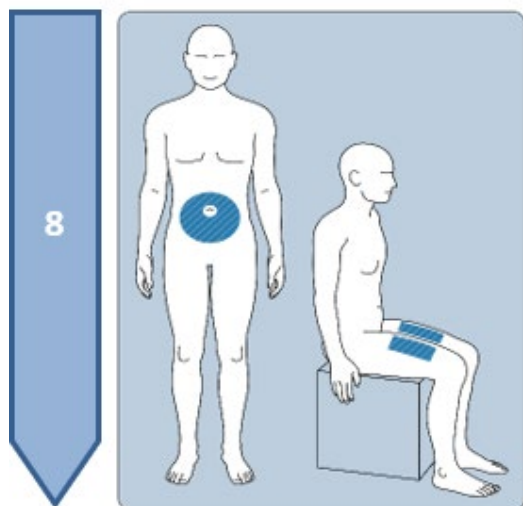

- Desinfizieren Sie vor der Injektion Ihre Haut im Injektionsbereich mit einem Alkoholtupfer.
- Lassen Sie den Bereich trocknen, bevor Sie das Arzneimittel injizieren.
- Sie müssen das Arzneimittel subkutan (unter die Haut) injizieren. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wo Sie es injizieren müssen.
- Mögliche Injektionsstellen sind der Bauch (mehr als fünf Zentimeter vom Bauchnabel entfernt) oder der Oberschenkel.
- Wenn Sie zwei Pens benötigen, nehmen Sie für jeden Pen eine andere Injektionsstelle (z. B. rechte und linke Seite des Bauchs oder rechter und linker Oberschenkel).
- Injizieren Sie auf keinen Fall in Hautstellen, die gereizt, gerötet, blau verfärbt, infiziert oder vernarbt sind.

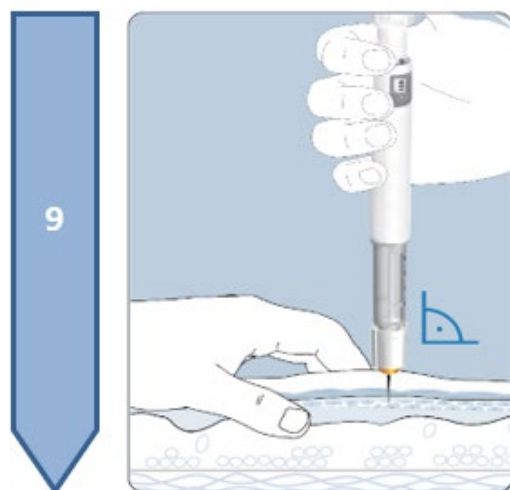


- Halten Sie den Pen so, dass das Dosierfenster und das Etikett während des Injektionsvorgangs sichtbar sind.
- Heben Sie eine Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger an.
- Führen Sie die Nadel in einem Winkel von 90 Grad ein, bis die orangefarbene Schutzhülle auf der Nadel nicht länger sichtbar ist.

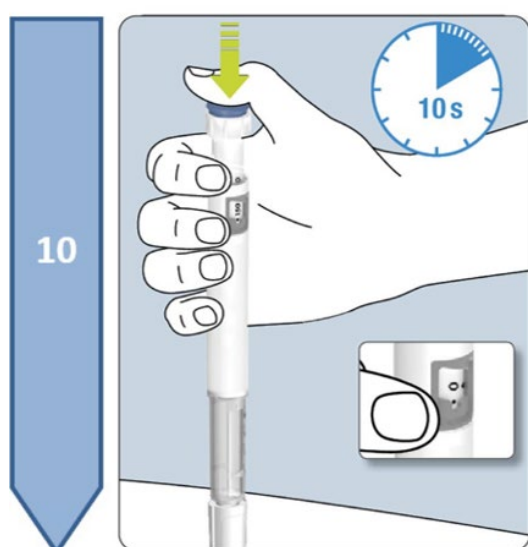

- Drücken Sie den Druckknopf ganz nach unten, bis sich die „0“-Markierung auf einer Linie mit dem Punkt im Dosierfenster befindet.
- Das leise Klickgeräusch hört auf, wenn der Injektionsvorgang abgeschlossen ist.
- Drücken Sie weiterhin den Druckknopf, während Sie die Nadel in Ihrer Haut halten.
- Zählen Sie langsam bis 10. Heben oder bewegen Sie den Pen während der Injektion nicht.
- Wenn die Nadel früher herausgezogen wird, sehen Sie möglicherweise einen Strahl der Lösung aus der Nadelspitze austreten. In diesem Fall wurde nicht die volle Dosis abgegeben.

11

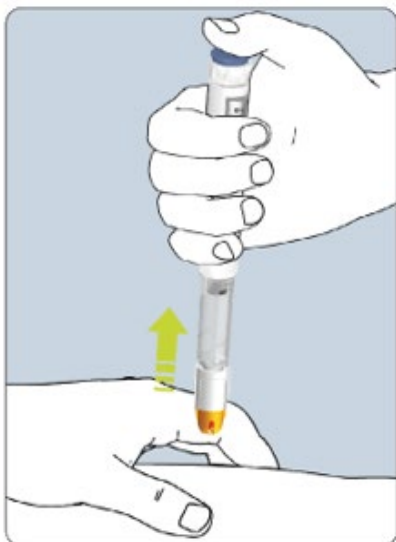


- Ziehen Sie die Nadel vorsichtig aus der Haut zurück, indem Sie sie gerade nach oben ziehen.
- Halten Sie die Injektionsstelle sauber, bis die kleine Injektionswunde verschlossen ist. Tragen Sie bei Bedarf ein Klebepflaster auf.

Hinweis:

- Die orangefarbene Schutzhülle blockiert automatisch und der nun sichtbare rote Verschlussindikator bedeckt die Nadel, um Sie zu schützen. Ist dies nicht der Fall, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
- Beim Entfernen der Nadel sehen Sie möglicherweise ein kleines Tröpfchen Flüssigkeit auf Ihrer Haut. Dieses Tröpfchen ist normal und bedeutet nicht, dass Sie unterdosiert haben.

12

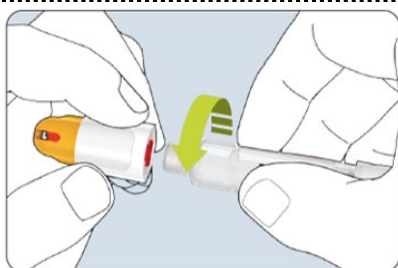


- Drehen Sie den Pen gegen den Uhrzeigersinn und entsorgen Sie die Nadel sachgemäß.

Hinweis:

- Sobald die Nadel abgeschraubt ist, deckt ein weiterer roter Sperrmechanismus die Unterseite der Nadel ab und sorgt so für zusätzliche Sicherheit.

13

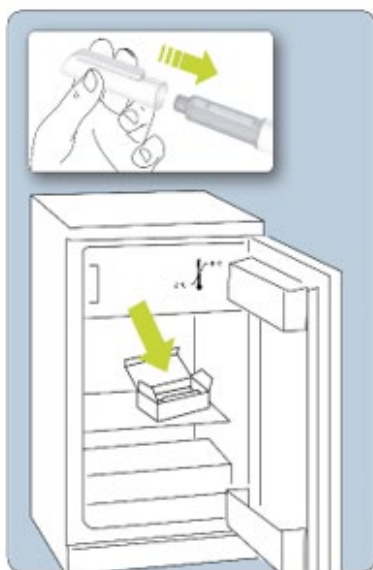

Hinweis: Setzen Sie die Kappe wieder fest auf den Pen auf.

Wiederverwendung des Pens:

- Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, ob Sie den Pen für eine zweite Injektion verwenden können. In diesem Fall legen Sie den Pen zurück in den Umkarton und bewahren Sie ihn bis zur nächsten Anwendung im Kühlschrank auf. Verwenden Sie den Pen nicht länger als 30 Tage.

Entsorgung des Pens und der Nadel:

- Entsorgen Sie den Pen und die Nadel nach der Anwendung gemäß den lokalen Vorschriften oder anhand der Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.